

Osseodensificação

Protocolo Sistema Versah® C-Guide®



Protocolo de Cirurgia Guiada
Versah®

Resumo: O sistema de cirurgia guiada da Versah® é inovador, pois permite a irrigação necessária com visualização adequada sobre a expansão/preparo da osteotomia; liberdade para manejar a broca Densah® e a capacidade de gerenciar com precisão vários locais com diferentes profundidades e diâmetros de preparo.



Adaptador Vertical Gauge

Etapa 1:

Digitalização: Obter a Tomografia Computadorizada e impressões clínicas.

Etapa 2:

Planejamento: Entre em contato com um laboratório certificado pela Versah®. Envie a tomografia e impressões clínicas. Confira os laboratórios certificados: versah-brasil.com.br/cirurgia-guiada

Etapa 3:


Agendar uma sessão de planejamento com seu laboratório para decidir o diâmetro do implante, angulação, instalação de anilha C-Guide® e sequência de utilização das brocas Densah®.

Etapa 4:

Selecione as peças apropriadas do G-Stop®. Encaixe o adaptador vertical gauge na canaleta da broca Densah®. O adaptador deve girar livremente. (figuras 1, 2, 3)

Exemplo:
Adaptador Vertical Gauge Large (L), (L) G-Stop® Key,
(L) Anilha C-Guide®

Etapa 3

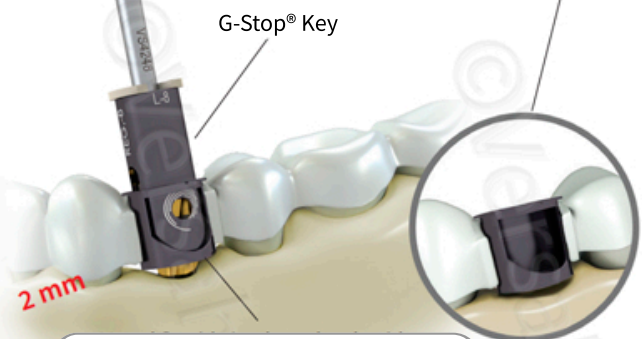

Versah® guide é um sistema bone level
A distância máxima entre a anilha C-Guide® e a crista óssea deve ser 2mm¹

Montagem do G-Stop®

G-Stop® Vertical Gauge + G-Stop® Key



Uso Único



Reutilizável

Figura 1

Anilha C-Guide®

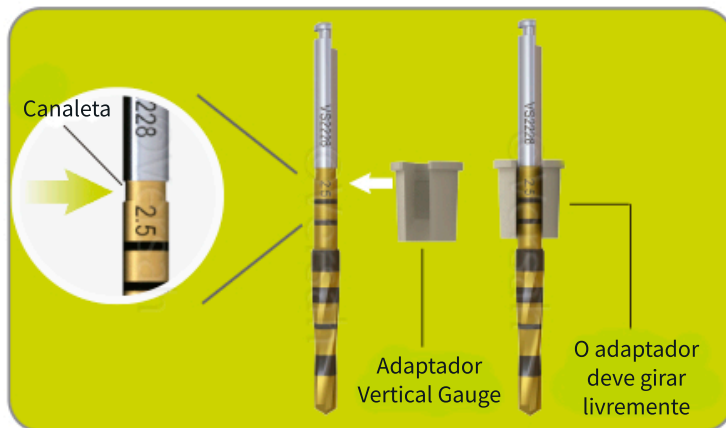


Figura 2

Encaixe adequado



A extremidade do G-Stop® Key com o Vortex desenhado deve estar orientada para a ponta da broca

Figura 3

Etapa 5:

siga o protocolo **Densah®** de fresagem sugerido para o seu sistema de implante.

Utilize os stops verticais **G-Stop®** Keys de forma escalonada. Por exemplo: quando a distância entre a base da anilha e a crista óssea for de 2mm (veja etapa 3) comece com o **G-Stop®** Key de 5mm para marcar sua osteotomia e estabelecer a trajetória inicial. Troque de 5mm para 10mm e depois repita em intervalos regulares até alcançar o comprimento final. Repita o processo com cada broca **Densah®**. Seu **G-Stop®** Key precisa estar alinhado com a anilha **C-Guide®**.

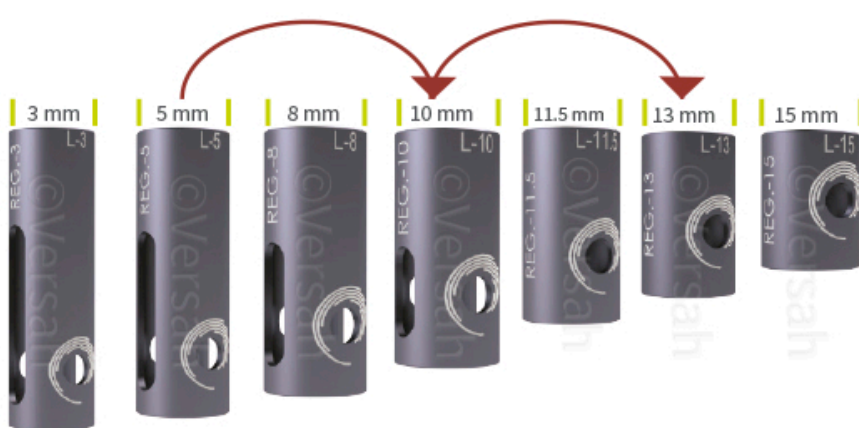


Figura 4 (Limitadores Verticais)

Exemplo (Comprimento final desejado 13mm):

- Broca Piloto com (5mm, então 10mm, 13mm...)
- VT1525 com (5mm, então 10mm, 13mm...)
- VT2535 com (5mm, então 10mm, 13mm...)

Medidas do Sistema de Cirurgia Guiada **Versah®**

Modelos Disponíveis

Brocas Densah® Compatíveis


Adaptador + G-Stop® Key

Anilha C-Guide®

S
Instalação de Implantes até 3.25mm





M
Instalação de Implantes até 4.3mm

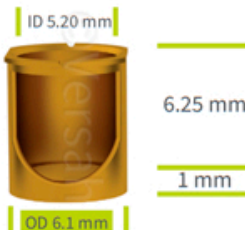

L
Instalação de Implantes até 5.3mm



XL
Instalação de Implantes até 6.2mm

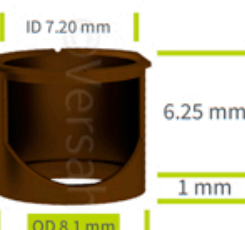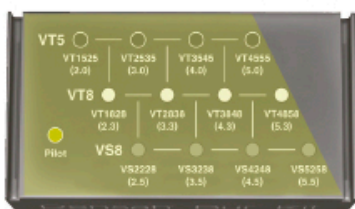

Para mais informações, acesse:

